

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.011	1 / 3
USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)		Especialidade	Revisão
		DIREÇÃO TÉCNICA	1

Objetivo

PADRONIZAR O USO DO DEA

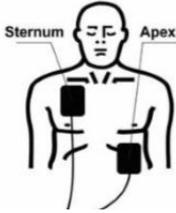
QUANDO USAR ?

Em todo paciente com suspeita de parada cardíaca:

- I. DESMAIADO (ou inconsciente: não responde quando chamado)
- II. NÃO RESPIRA (ou a respiração está parecendo em AGONIA/GASPING)
- III. SEM PULSO (se você é leigo, usar mesmo sem palpar o pulso)

*Não deve ser usado em paciente consciente, respirando bem e com pulso

COMO USAR

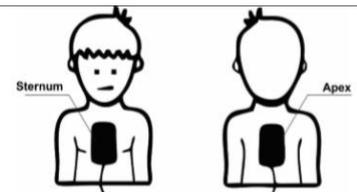
Responsável	Ação	
<p>Treinado em BLS ou qualquer profissional de saúde</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconecte o cabo da energia (funciona com bateria) 2. Abra a camisa, retire ou corte a camisa do paciente 3. Seque a pele e veja se é necessário raspar pelos antes de conectar as pás adesivas nos locais indicados (há um barbeador no kit) 4. Colar as pás adesivas no tórax do paciente conforme o desenho: <ol style="list-style-type: none"> a. A com a cor VERMELHA escrito RA vai ser colada do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA 	
		<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> b. A com a cor VERDE escrito LL vai ser colada debaixo da AXILA, perto onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal)
		
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Encaixar o cabo das pás no encaixe lateral do aparelho (identificado pelo número 1 na foto): 	
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ligar o aparelho, apertando o botão VERDE DURANTE 3 SEGUNDOS 	
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Manter o equipamento a uma distância segura: 20 cm do paciente e 20 cm de você 	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.011	2 / 3
USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)		Especialidade	Revisão
		DIREÇÃO TÉCNICA	1

	<p>8. O equipamento iniciará uma série de COMANDOS que DEVEM SER SEGUIDOS:</p>
<p>“AFASTE-SE DO PACIENTE” ou “MANTENHA-SE AFASTADO” Neste momento, ninguém deve tocar no paciente</p>	
<p>“ANALISANDO” ou “ANALISANDO O RITMO” Ninguém deve tocar no paciente</p>	
<p>“TRATAMENTO INDICADO” Significa que o paciente deverá receber uma desfibrilação (choque = carga 150 J). APERTAR IMEDIATAMENTE O BOTÃO LARANJA NÃO TOCAR NO PACIENTE</p>	
<p>“TRATAMENTO NÃO INDICADO” Significa que não precisa de choque. Deverá voltar imediatamente a massagem cardíaca.</p>	
	<p>“REALIZE A RCP” Orientação para equipe retomar imediatamente a massagem cardíaca externa 30 massagens para 2 ventilações (se não for ventilar, ficar somente massageando)</p>
<p>OBS.: pode-se acompanhar o ritmo, comandos e FC na tela por escrito:</p>	

OBSERVAÇÕES

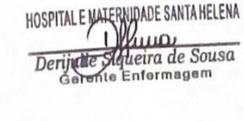
- a) POSSO USAR EM CRIANÇAS? SIM. O ideal é que seja usado um desfibrilador (disponível na UTIN), mas em caso emergencial pode ser utilizado este. COMO POSICIONAR AS PÁS EM CRIANÇAS? Posicionar com uma distância de 3 cm entre uma e outra (ou uma na frente e outra nas costas se a criança for muito pequena)
- b) CUIDADOS APÓS O USO:
- REPOR NO CARRINHO DO DEA: 1 Ambu adulto, 1 Máscara facial adulto, 1 Látex 3 metros, 1 Um barbeador descartável
 - RECONECTAR NA TOMADA APÓS O USO (manter sempre conectado para carregar bateria)**



Referências bibliográficas

Manual do equipamento e diretrizes de reanimação AHA 2020

 <p>SANTA HELENA HOSPITAL E MATERNIDADE</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código do Documento	Página
		POP.DT.011	3 / 3
	USO DO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	Especialidade	Revisão
		DIREÇÃO TÉCNICA	1

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:	Validado por:
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	DERIJULIE SIQUEIRA Gerente de Enfermagem	ULLY MARIANNE F. LEMOS Coord. da Qualidade
Data: 24/02/2021	Data: 12/04/2024	Data: 16/04/2024	Data: 17/04/2024
Assinaturas e carimbo:			
  			

Histórico das últimas duas revisões

Nº	Descrição das alterações:	Data:
1.	Ajuste conforme gestão de documentos (2 anos0	12/04/2024
2.		