

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Código do Documento	Página
		POP.DT.013	1 / 4
	<b>CARDIOVERSÃO- ECAFIX DF- ADULTO</b>	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

**Objetivo**

PADRONIZAR O USO DA CARDIOVERSÃO NO ECAFIX (MONOFÁSICO)

**QUANDO USAR ?**

COM DIAGNÓSTICO DE ARRITMIA ONDE ESTEJA INDICADO CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA:

- 1) Arritmias instáveis hemodinamicamente: rebaixamento de consciência, choque, edema agudo de pulmão, etc.
- 2) Arritmias em pacientes estáveis refratários outros tratamentos menos invasivos (manobras vagais, adenosina, etc).


**COMO VERIFICAR O RITMO DO PACIENTE:**

*Atenção! Para monitorizar o ritmo do paciente é necessário um monitor externo antes de decidir por cardioverter, visto que o equipamento não conta com tela para monitorização de ritmo. Não é necessário retirar eletrodos de monitorização para desfibrilação ou cardioversão.*


**RITMOS PASSÍVEIS DE CARDIOVERSÃO**

**1 – TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA:**

taquicardia com ondas P após o QRS ou ondas P não visualizadas

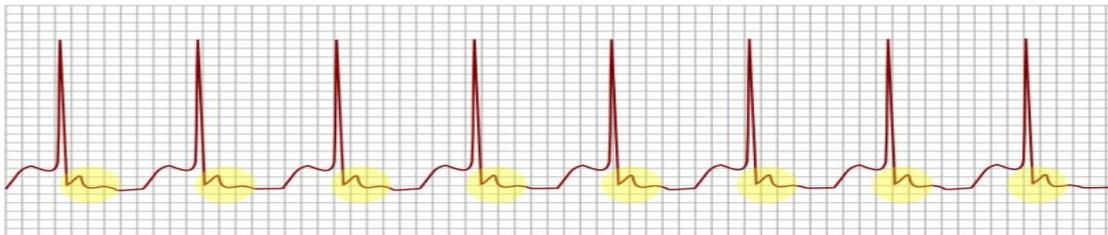

**2 – FLUTTER ATRIAL: ondas P formato de “dente de serrate”**

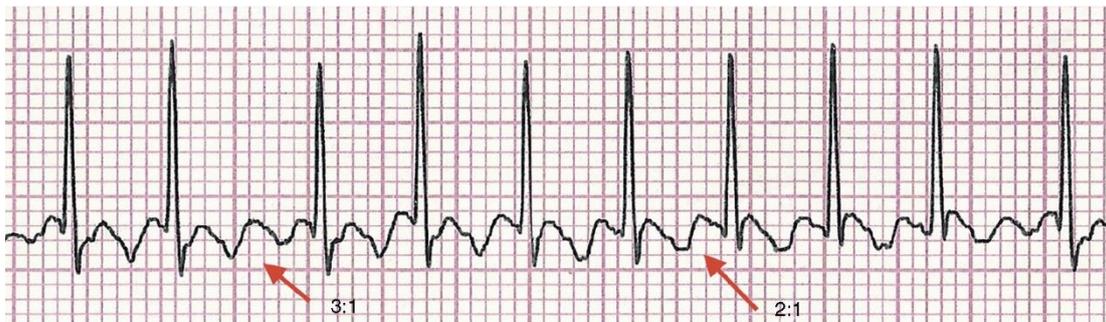

**3 - TAQUICARDIA VENTRICULAR COM PULSO (QRS largo e paciente COM PULSO PALPÁVEL)**





**4 - FIBRILAÇÃO ATRIAL DE ALTA RESPOSTA COM INSTABILIDADE**

**COMO DESFIBRILAR UM PACIENTE UTILIZANDO O DESFIBRILADOR ECAFIX**

Responsável	Ação
-------------	------

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Código do Documento	Página
		POP.DT.013	2 / 4
	<b>CARDIOVERSÃO- ECAFIX DF- ADULTO</b>	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

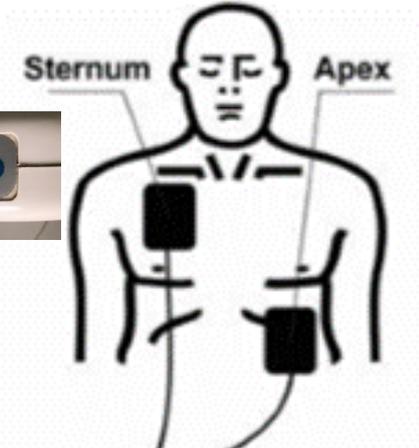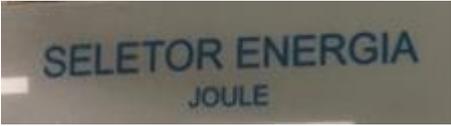Médico, enfermeiro ou técnico treinado	1. Ligar o equipamento: botão LIGA (canto inferior direito)	
	2. Abra a camisa, retire ou corte a camisa do paciente	
	3. Passar o gel (azul) no tórax do paciente nos locais indicados na imagem acima	
	4. Posicionar as pás sobre o tórax do paciente conforme	
		
	orientações: a) A escrito <b>ESTERNUM</b> do lado DIREITO do PEITO na parte de CIMA b) A escrito <b>APEX</b> na linha da AXILA, abaixo onde está o MAMILO (quinto espaço intercostal)	
	5. SEGUIR A SEQUÊNCIA DOS NÚMEROS 1 – 2 e 3 PARA CARDIOVERTER	
	6. ONDE ESTÁ 1 (SELETOR DE ENERGIA), <b>APERTE O BOTÃO PARA A CARGA DE 80 JOULES</b> (equipamento monofásico)	
	7. <b>ANTES DE ADMINISTRAR O CHOQUE É NECESSÁRIO APERTAR O BOTÃO SINC (SINCRONIZAR) – que irá disparar o choque sobre a onda R</b>	

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Código do Documento	Página
		POP.DT.013	3 / 4
	<b>CARDIOVERSÃO- ECAFIX DF- ADULTO</b>	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

	 <p>8. Na parte onde está o número <b>2</b>: <b>CARGA</b> aperte o botão para carregar as pás de energia para o choque ( A PARTIR DESTE MOMENTO AS PÁS ESTARÃO CARREGADAS E LUZ VERDE SE ACENDE INDICANDO O CARREGAMENTO. TENHA CUIDADO AO MANUSEAR AS PÁS).</p>  <p>Obs.: A qualquer momento pode-se desistir de administrar um choque, podendo descarregar as pás, apertando o botão ANULA carga:</p> 
	<p>9. Certifique-se de que as pás estão no local correto no tórax do paciente</p>
	<p>10. Certifique-se que o paciente está inconsciente ou <b>SEDADO</b></p>
	<p>11. Certifique-se de que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Você não está encostado na maca</li> <li>Ninguém da equipe está encostado na maca</li> <li>A fonte de oxigênio está temporariamente desligada</li> </ol>
	<p><b>12. ADMINISTRE A DESFIBRILAÇÃO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>APERTANDO AO MESMO TEMPO OS DOIS BOTÕES (PRETO E VERMELHO) das pás de desfibrilação</li> </ol>  <p><b>OU</b></p>  <p>Solicite que alguém aperte o botão de número 3, escrito DISPARO, no carrinho:</p>
	<p>13. OBS.: caso seja necessário um segundo choque utilizar 160 JOULES</p>

**Referências bibliográficas**

Manual do equipamento e diretrizes de reanimação AHA 2020

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	Código do Documento	Página
		POP.DT.013	4 / 4
	<b>CARDIOVERSÃO- ECAFIX DF- ADULTO</b>	Especialidade	Revisão
		TODOS	1

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprovado por:</b>	<b>Validado por:</b>
MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	MARCOS ALVES PAVIONE Diretor Técnico	DERIJULIE SIQUEIRA Gerente de Enfermagem	ULLY MARIANNE F. LEMOS Coord. da Qualidade
<b>Data: 03/03/2021</b>	<b>Data: 12/04/2024</b>	<b>Data: 16/04/2024</b>	<b>Data: 17/04/2024</b>
<b>Assinaturas e carimbo:</b>			
  			

#### Histórico das últimas duas revisões

Nº	Descrição das alterações:	Data:
1.	Ajuste conforme gestão de documentos (2 anos)	12/04/2024
2.		